


Manual Patient Portal – Usuario Adminsitrador



Conexión	3
Menús.....	3
Usuarios	4
Listado usuarios	4
Nuevo usuario	4
Editar usuario.....	5
Eliminar usuario.....	5
Asignaciones	6
Estudios.....	6
Usuario tipo administrador	7
Asignaciones.....	8
Tarjetas.....	8
Según cita del paciente	8
Selección manual	9
Usuarios.....	9
Pacientes.....	9
Seleccionados	9
Info	10
Cuenta	10
Configuración	11
Orden impresión tarjetas.....	11
Disponibilidad de resultados.....	11
Desconexión.....	12


Conexión

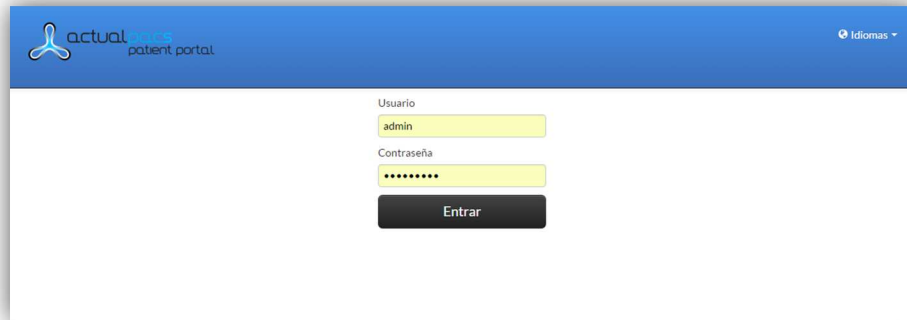

The screenshot shows the login interface of the Actualpacs Patient Portal. At the top, there is a blue header with the logo on the left and a language dropdown menu labeled 'Idiomas' on the right. The main area is white and contains a login form with two input fields: 'Usuario' (User) with the text 'admin' and 'Contraseña' (Password) with masked characters. Below these fields is a dark grey button labeled 'Entrar' (Enter).

Accedemos a la página de conexión de Actualpacs Patient Portal a través de la dirección y el usuario y contraseña proporcionados.

Menús

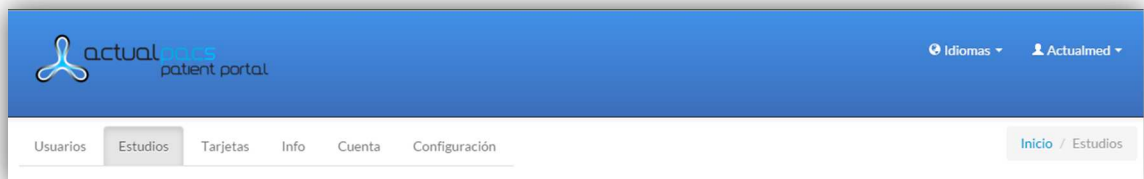


En la parte superior derecha podemos seleccionar el idioma en que queremos que se muestre: español, inglés, catalán o alemán y desconectarnos de la plataforma.

Luego en la parte izquierda podemos navegar, siempre según los permisos que tengamos, entre el apartado de usuario, estudios, tarjetas, información, cuenta y configuración.

Usuarios

Listado usuarios

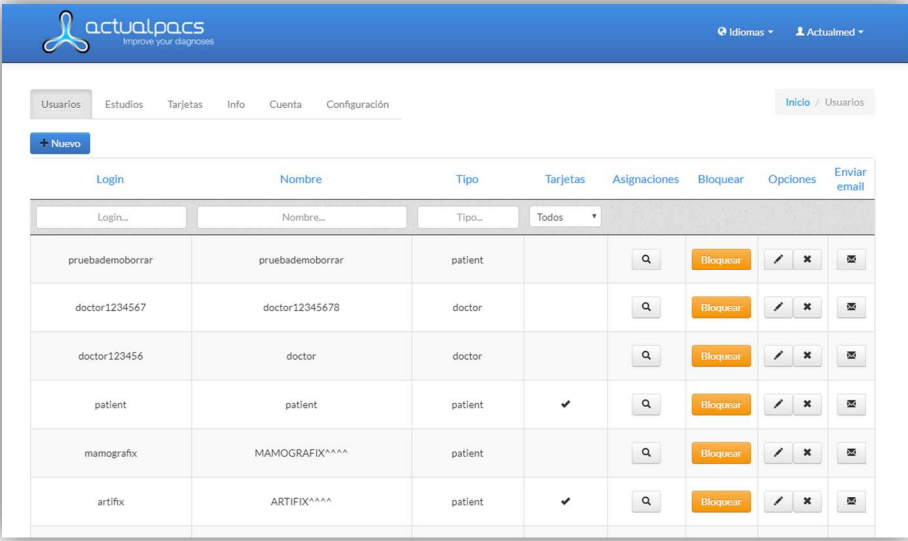

Login	Nombre	Tipo	Tarjetas	Asignaciones	Bloquear	Opciones	Enviar email
pruebademoborrar	pruebademoborrar	patient			Bloquear	Editar Eliminar	Enviar email
doctor1234567	doctor12345678	doctor			Bloquear	Editar Eliminar	Enviar email
doctor123456	doctor	doctor			Bloquear	Editar Eliminar	Enviar email
patient	patient	patient	✓		Bloquear	Editar Eliminar	Enviar email
mamografix	MAMOGRAFIX****	patient			Bloquear	Editar Eliminar	Enviar email
artifix	ARTIFIX****	patient	✓		Bloquear	Editar Eliminar	Enviar email

Aquí podemos ver el listado de todos los usuarios doctor y paciente de la plataforma. Las acciones que nos permite esta pantalla.

- Nuevo: Crear un nuevo usuario.
- Asignaciones: Ver las asignaciones que tiene cada usuario.
- Bloquear/desbloquear: Bloquear al usuario si queremos que no tenga más acceso o permitirle de nuevo el acceso.
- Editar (icono lápiz): Editar la información de nuestro usuario.
- Eliminar (icono x): Eliminar el usuario.
- Enviar email: Enviar un email al usuario para que acceda a la plataforma. El email se puede personalizar según centro.

Podemos también buscar los usuarios por:

- Login: nombre de usuario para conectarse.
- Nombre: Nombre de paciente.
- Tipo: Tipo de paciente.
- Tarjetas: Si se ha imprimido la tarjeta o no.

Nuevo usuario

Campos comunes entre usuarios

- Login: nombre de usuario para conectarse
- Nombre: Nombre que aparecerá en la plataforma
- Email: correo electrónico

- Contraseña: podemos introducir nosotros una o generar una aleatoria con el botón “Generar”.

Campos específicos entre tipos de usuario

- Tipo: **paciente**
- Identificador de paciente: ID de paciente dentro del pacs.
- Tipo: **doctor**
- TagDicom: Campo ref_physician dentro del pacs.

Tanto el campo *Identificador de paciente* como *TagDicom* son necesarios para que ambos usuarios tengan sus propios estudios. Si alguno de estos campos no está descrito sólo podrán ver los estudios asignados de manera manual.

The screenshot shows the 'Nuevo usuario' form in the ActualMed patient portal. The form is titled 'Nuevo usuario' and has a blue header with the ActualMed logo and navigation links. The form fields are: Tipo (dropdown menu), Identificador de Paciente (text input), Login (text input), Nombre (text input), Email (text input), Contraseña (text input with a 'Generar' button), and Repetir contraseña (text input). A blue 'Editar' button is located at the bottom of the form.

Editar usuario

Los campos editables de este formulario son:

- Identificador de paciente
- TagDicom
- Nombre
- Email
- Contraseña

Hemos de tener en cuenta que cada vez que se editarán los datos del paciente, la contraseña también lo hará.

The screenshot shows the 'Editar usuario' form in the ActualMed patient portal. The form is titled 'Editar usuario' and has a blue header with the ActualMed logo and navigation links. The form fields are: Tipo (dropdown menu), Identificador de Paciente (text input), Login (text input), Nombre (text input), Email (text input), Contraseña (text input with a 'Generar' button), and Repetir contraseña (text input). A blue 'Editar' button is located at the bottom of the form. A notification bar at the top of the form states: 'Un nuevo login será generado al cambiar el nombre del usuario'.

Eliminar usuario

Clicamos encima del icono X de la página principal de usuarios. Una vez eliminado nos aparecerá una alerta confirmando la eliminación.

Asignaciones

Si clicamos en el icono podemos ver los estudios asignados a este paciente:



The screenshot shows the 'actual' patient portal interface. At the top, there's a navigation bar with 'actual' logo and 'patient portal' text. Below it, a menu bar includes 'Usuarios', 'Estudios', 'Tarjetas', 'Info', 'Cuenta', and 'Configuración'. A breadcrumb trail shows 'Inicio / Usuarios / Estudios'. The main content area is titled 'Ver estudios asignados a: DQ0D00Q0Q00QQ^'^'. It contains a table with columns: ID Paciente, Paciente, Edad, Sexo, Accesion Number, Fecha, Descripción, Modalidades, Denegar, and Opciones. Two rows of study data are visible. The first row has ID 08206874, patient DEMO, age 66, female, accession number 0, date 2015-11-06 12:23:34, description STANDARD SCREENING - COMBOHD, modality MAMO, and a Denegar button. The second row has ID vAD7q3, patient VIX, age blank, sex Otro, accession number 0, date 2006-10-05 10:15:56, description EXTREMITÉS INFÉRIEURES PIED CHEVILLE UHR (ADULTE), modality TAC, and a Denegar button. At the bottom left, it says '1 - 2 (2)' and at the bottom right, there are pagination controls.

ID Paciente	Paciente	Edad	Sexo	Accesion Number	Fecha	Descripción	Modalidades	Denegar	Opciones
08206874	DEMO	66	Femenino	0	2015-11-06 12:23:34	STANDARD SCREENING - COMBOHD	MAMO	Denegar	   
vAD7q3	VIX		Otro	0	2006-10-05 10:15:56	EXTREMITÉS INFÉRIEURES PIED CHEVILLE UHR (ADULTE)	TAC	Denegar	   


Acciones:

- Denegar: un estudio concreto a este usuario
- Icono ojo: ver estudio a través del visor
- Icono hoja papel: ver el informe en PDF. Si éste todavía no está disponible aparecerá el icono X.
- Icono flecha sin fondo: descargar las imágenes del estudio para verlas desde otros dispositivos. Para verlas es necesario un visor, en la descarga se sugiere el visor gratuito Radiant pero se puede utilizar cualquiera que permita leer imágenes DICOM.
- Icono flecha con fondo: Descargar el cd con las imágenes.

Estudios

Accedemos directamente a la sección “Estudios”, donde nos aparecerá un listado con los estudios asignados. Muestra la información mostrada en columnas es la siguiente:

- ID Paciente: El ID del Paciente conforme la clínica donde se ha hecho el estudio.
- Paciente: Nombre del paciente
- Edad: Edad del paciente.
- Fecha: Fecha del estudio.
- Descripción: Descripción del estudio si la hubiera.
- Modalidades: Tipo de estudio.

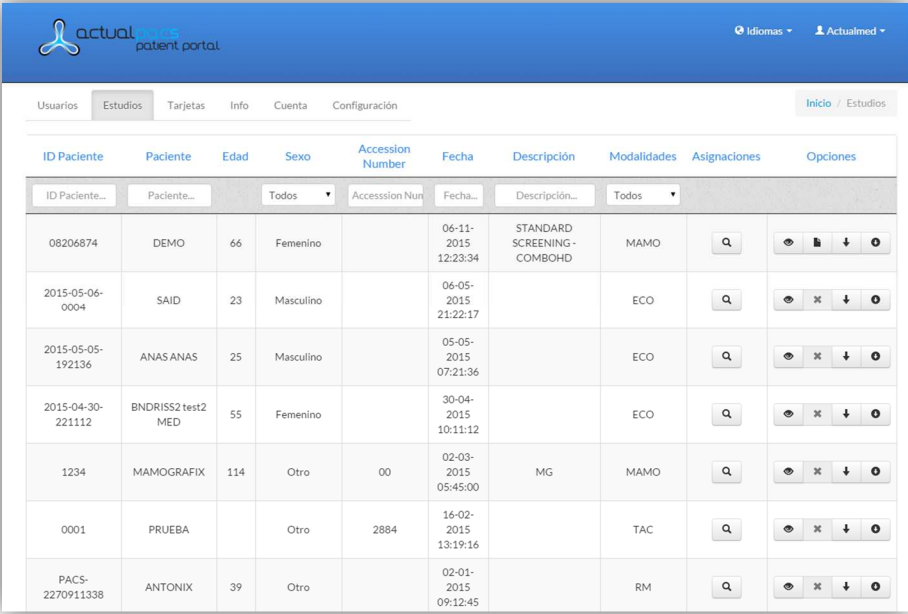

ID Paciente	Paciente	Edad	Sexo	Accession Number	Fecha	Descripción	Modalidades	Asignaciones	Opciones
08206874	DEMO	66	Femenino		06-11-2015 12:23:34	STANDARD SCREENING - COMBOHD	MAMO		[Ojo] [Hoja] [Flecha] [Ejecutable]
2015-05-06-0004	SAID	23	Masculino		06-05-2015 21:22:17		ECO		[Ojo] [X] [Flecha] [Ejecutable]
2015-05-05-192136	ANAS ANAS	25	Masculino		05-05-2015 07:21:36		ECO		[Ojo] [X] [Flecha] [Ejecutable]
2015-04-30-221112	BNDRISS2 test2 MED	55	Femenino		30-04-2015 10:11:12		ECO		[Ojo] [X] [Flecha] [Ejecutable]
1234	MAMOGRAFIX	114	Otro	00	02-03-2015 05:45:00	MG	MAMO		[Ojo] [X] [Flecha] [Ejecutable]
0001	PRUEBA		Otro	2884	16-02-2015 13:19:16		TAC		[Ojo] [X] [Flecha] [Ejecutable]
PACS-2270911338	ANTONIX	39	Otro		02-01-2015 09:12:45		RM		[Ojo] [X] [Flecha] [Ejecutable]

Columna “OPCIONES”:

Por cada estudio podemos realizar las siguientes acciones:

- Icono ojo: ver estudio a través del visor.
- Icono hoja papel: ver el informe en PDF. Si éste todavía no está disponible aparecerá el icono X.
- Icono flecha sin fondo: descargar las imágenes del estudio para verlas desde otros dispositivos. Para verlas es necesario un visor, en la descarga se sugiere el visor gratuito Radiant pero se puede utilizar cualquiera que permita leer imágenes DICOM.
- Icono flecha con fondo: Descargar el cd con las imágenes.
- Descarga ejecutable: Descargar las imágenes con un ejecutable ya incluido. Radiant para sistemas Windows y Osirix Lite para sistema MacOs.

Usuario tipo administrador


Este usuario podrá ver el listado total de estudios de la plataforma, tal y como muestra la pantalla superior.

Acciones específicas del usuario

Asignaciones

Este usuario podrá asignar de manera individual los estudios de la siguiente forma:

1. Clicamos en el icono lupa de la fila del estudio
2. Buscamos el usuario al que queremos asígnale el estudio
3. Clicamos encima del botón Asignar.

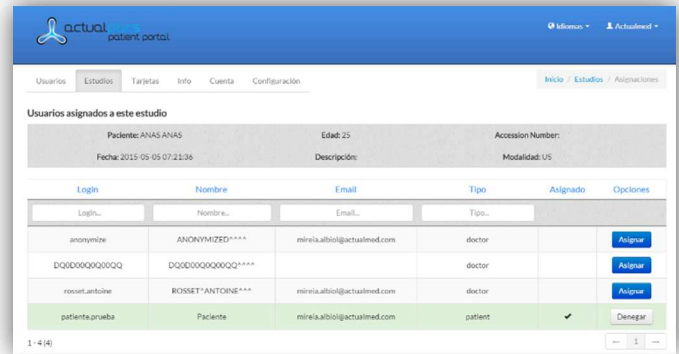

Si el estudio ya está asignado aparecerá la fila en verde.

Los estudios se pueden asignar a más de una persona.

Tarjetas



En este apartado tenemos dos formas de crear tarjetas, una según la cita del paciente y otra de manera manual.

Según cita del paciente

Esta forma de imprimir tarjetas realiza la búsqueda según cuando tuvo la cita el paciente y si la tarjeta no ha sido imprimida.

Desde el desplegable de pacientes seleccionaremos alguna de estas opciones:

- Hoy
- Ayer
- Esta semana
- Este mes
- Seleccionar día

Luego clicaremos en el botón aceptar y se abrirá una ventana nueva con las tarjetas para imprimir.

Selección manual

Si nuestro sistema no utiliza citas o queremos imprimir de nuevo una tarjeta deberemos seleccionar esta forma. Cuando entramos en la página de Selección manual nos encontraremos con tres pestañas: Usuarios, Seleccionados y Pacientes

Usuarios

Seleccionados (0)

Pacientes

Todos

Hoy

Ayer

	Paciente	Identificador de Paciente	Cita	Tarjetas
✓ ✕	Paciente...	Identificador de Paciente...	Cita...	Todos ▾
	DE LOS PALOTES^PEPITO^^^	A000002	25-02-2016 08:16:10	✓
	ABRIL GARCÍA^SERGIO^^^	REG. 2186555	25-02-2016 08:16:09	✓
	PRUEBAS PFER^SERGIO^^^	REG. 5884	25-02-2016 08:16:09	✓

1 - 3 (3)

←

1

→

Usuarios

Listado de usuarios creadas dentro del Patient Portal. Para poder crear sus tarjetas deberemos seleccionar el usuario correspondiente y automáticamente la columna Seleccionados se actualizará.

Filtros

- Todos los usuarios
- Usuarios creados hoy
- Usuarios creados ayer

Pacientes

Listado de pacientes creados en el PACS. Si no tenemos el usuario dentro del Patient Portal con sus propias credenciales podremos seleccionarlo desde este apartado y automáticamente creará el usuario de tipo paciente y lo agregará en el listado de pacientes.

Acción

Seleccionamos paciente o pacientes > crear usuarios


Otras acciones

- Seleccionar todo
- Deseleccionar todo
- Buscar por
 - o Identificador de paciente
 - o Nombre
 - o Fecha de creación del paciente

Seleccionados

Aparecerá el listado de usuarios seleccionados. Para sacar las tarjetas deberemos darle al botón Generar y abrirá una nueva ventana con un documento en pdf para descargar o imprimir.

Desde este apartado también podremos enviar las credenciales al usuario que seleccionemos. Si este no tiene email en su configuración saldrá una ventana modal donde podremos introducir uno.

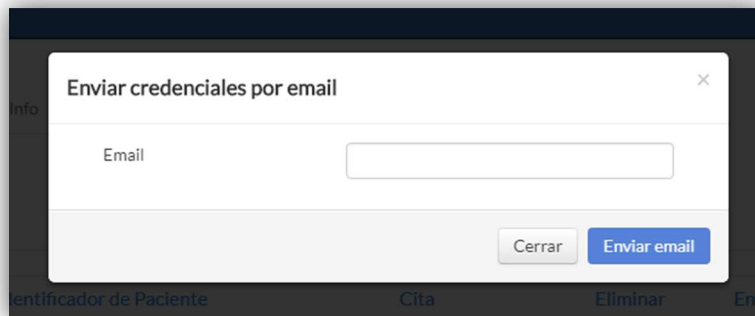

Enviar credenciales por email

Email


Info



actual med patient portal			
Idiomas Actualmed			
Usuarios Estudios Tarjetas Info Cuenta Configuración Inicio / Info			
		Fecha	
Último estudio	Paciente: 08206874 - DEMO	2015-12-09 17:09:57	1 día 18 horas 5 minutos
Último informe	Accession Number: 123456	-0001-11-30 00:00:00	10 horas 15 minutos
Última cita	Paciente: -	2015-12-29 10:19:10	0 días 0 horas 56 minutos

Podemos ver la información sobre el último estudio, último informe y última cita.

Cuenta

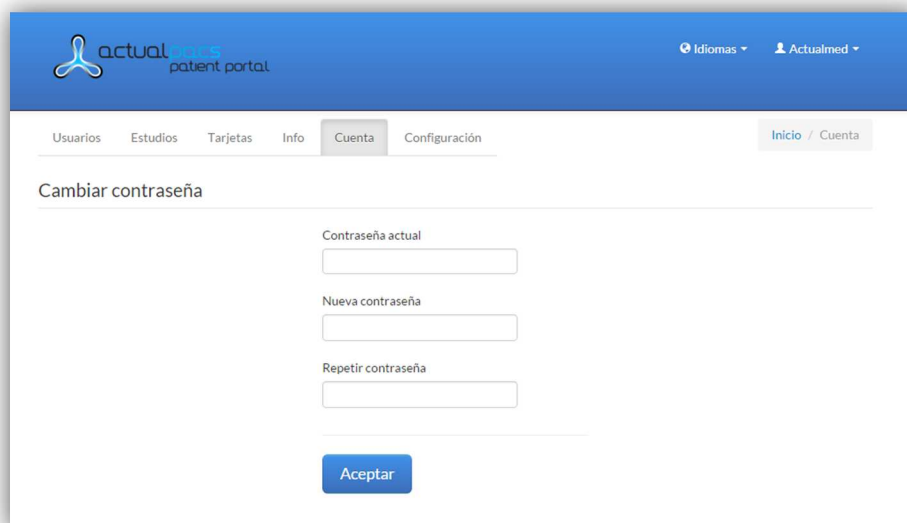

Cambiar contraseña

Contraseña actual


Nueva contraseña

Repetir contraseña

Podemos editar nuestra contraseña

Configuración


Orden impresión tarjetas

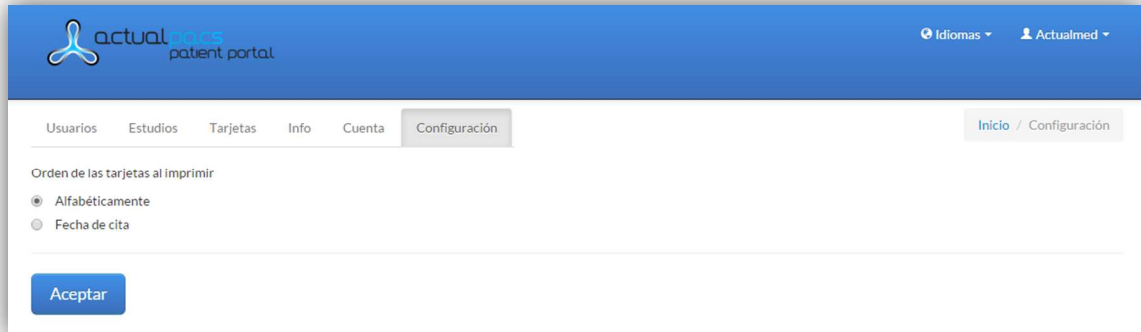

The screenshot shows the 'actualmed patient portal' interface. The top navigation bar includes 'Idiomas' and 'Actualmed'. The main navigation menu has 'Usuarios', 'Estudios', 'Tarjetas', 'Info', 'Cuenta', and 'Configuración'. The 'Configuración' tab is active, showing the 'Orden de las tarjetas al imprimir' section. It contains two radio buttons: 'Alfabéticamente' (selected) and 'Fecha de cita'. An 'Aceptar' button is at the bottom.

En este apartado podremos configurar el orden en que aparecerán las tarjetas cuando se impriman ya sea en orden alfabético o según la fecha de la cita.

Disponibilidad de resultados

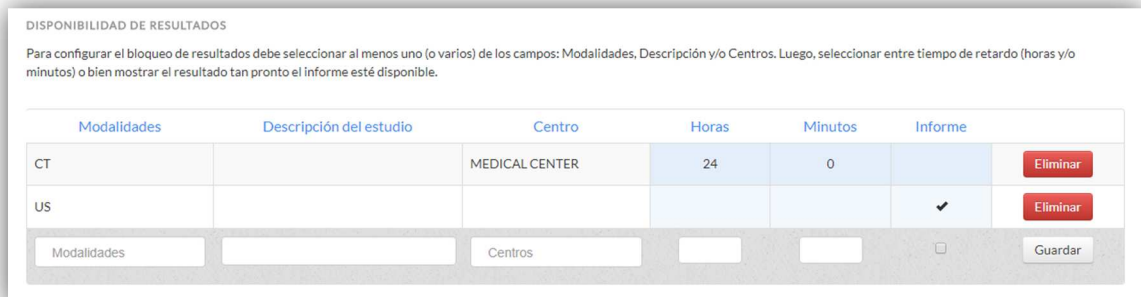

The screenshot shows the 'DISPONIBILIDAD DE RESULTADOS' configuration page. It includes a text box explaining that users must select at least one field (Modalidades, Descripción y/o Centros) and a time delay (Horas y/o Minutos) or choose to show results as soon as the report is available. Below is a table with columns: Modalidades, Descripción del estudio, Centro, Horas, Minutos, Informe, and a red 'Eliminar' button. The table contains two rows: 'CT' with 'MEDICAL CENTER' and '24' hours, and 'US' with a checkmark in the 'Informe' column. At the bottom, there are input fields for 'Modalidades', 'Centros', 'Horas', and 'Minutos', a checkbox for 'Informe', and a 'Guardar' button.

Modalidades	Descripción del estudio	Centro	Horas	Minutos	Informe	
CT		MEDICAL CENTER	24	0		Eliminar
US					✓	Eliminar

Modalidades: Centros: Horas: Minutos: Informe: ☐ Guardar

Podemos configurar cuando un paciente podrá acceder a sus resultados. Las opciones disponibles:

Bloquear por:

- Modalidad: Se puede seleccionar una o varias.
- Descripción del estudio: Introducir un texto concreto que contenga la descripción del estudio.
- Centro: Se puede seleccionar uno o varios.

Duración:

- Horas: Cuando pasen X horas después de la creación del estudio
- Informe: Cuando llegue el informe

Podemos bloquear el resultado por uno de los filtros o por varios pero la duración sólo puede ser una u otra.

Desconexión

Seleccionar el desplegable superior derecho, donde aparece el nombre de usuario y pinchar en *Cerrar sesión*.